


Gyártó: ETKIN TIBBI
Típus: KAYRA + 51-MZ

A VEZÉRLŐPULT BEVEZETÉS

A lámpafejek vezérlése a fejeken található vezérlőpanelről történik. Be-ki, fényerősség beállítás, színhőmérséklet beállítás, fogászati mód be-ki, fényfókusz átmérő beállítása lehetséges a fényvezérlő panelekről történik.

Kezelőpanel

A világítófejek be- és kikapcsolása, fényintenzitás, színhőmérséklet, fényfókusz átmérő, fogászati mód erről a panelről vezérelhető.

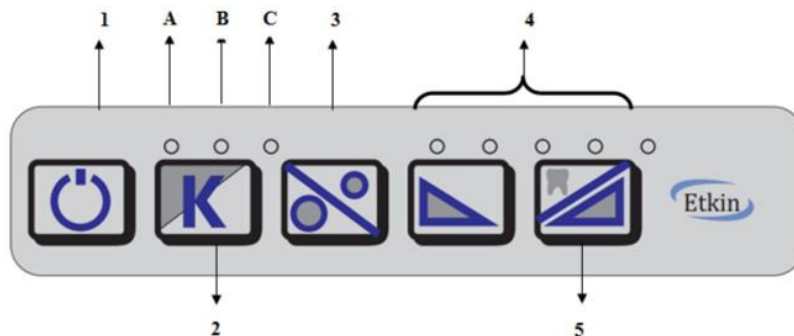

ábra Vezérlőpult

- A lámpafej vezérléséhez a panelt a BE/KI (1) gombbal kell bekapcsolni.

Vezérlőpult. A lámpafej kikapcsolásához az ON/OFF (1) gombot 2 másodpercig le kell nyomni.

A színhőmérséklet beállítása a "K" gombbal (2) 3 fokozatban állítható be. (csak egy szakasz van meghatározva fix színhőmérsékletű világítófejekhez) A narancssárga és kék színű LED-ek mutatják, hogy melyik színhőmérséklet van beállítva.

A lámpafej színhőmérsékletét 2 narancssárga és kék LED jelzi.

- Minimális színhőmérséklet esetén narancssárga LED (A)
 - A max. színhőmérséklet, kék LED (B)
 - A közép színhőmérsékleten narancssárga és kék LED-ek együtt világítanak.
- A folt mérete a gombszámmal (3) 3 fokozatban állítható.
 - A fényerősség a (4) gombbal 10 fokozatban állítható. (minden LED 2 lépést mutat) A fényintenzitás balról jobbra növekszik ennél a típusú vezérlőpanelnél. A fényintenzitása növelhető az (5) gombbal normál üzemmódban.
 - Ha a lámpafej ki van kapcsolva, a Fogászati mód aktiválható a Dental gomb (5) 2 másodperces lenyomásával.
Különösen szűk területek, például a száj belsejének megvilágítására használják.
Amikor az
A fogászati mód aktiválva van, a fogorvosi mód kikapcsolásához meg kell nyomni az ON/OFF gombot (1) 2 másodperc. Ha a fogászati mód be van kapcsolva, a fény intenzitása növelhető vagy csökkenthető a gombok száma


A mobil vizsgálólámpa mozgása

A mobil vizsgálólámpa biztonságos szállítása érdekében a rugós kart zárni kell és a lámpafejet párhuzamosan kell elhelyezni az akkumulátoregységből kilépő csővel következnek. Nem szabad lejtős és egyenetlen felületeken szállítani/használni, hogy elkerüljük az elvesztést egyensúly vagy felborulás szállítás közben, a szállítást a rajta lévő fogantyúval kell végezni.



Sterilizálható fogantyú

A sterilizálható fogantyú eltávolításához meg kell nyomni és meg kell húzni a fogantyún lévő reteszt le. Ha megpróbálja eltávolítani a fogantyút a retesz megnyomása nélkül, az károsíthatja a fogantyút.

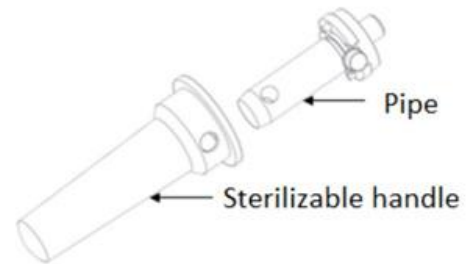

A lámpa működési állapotát minden használat előtt ellenőrizni kell:

Minden használat előtt ellenőrizze a lámpát, a lámpafejet, a vezérlőpaneleket és az egyéb csatlakozóberendezéseket ellenőrizni kell.

Győződjön meg arról, hogy a lámpafejek és a karrendszerek nem sérültek vagy megereszkedtek.

